


Freedom Rocker BlotBot

Automate processing / washing of blots and gels




BlotBot 120

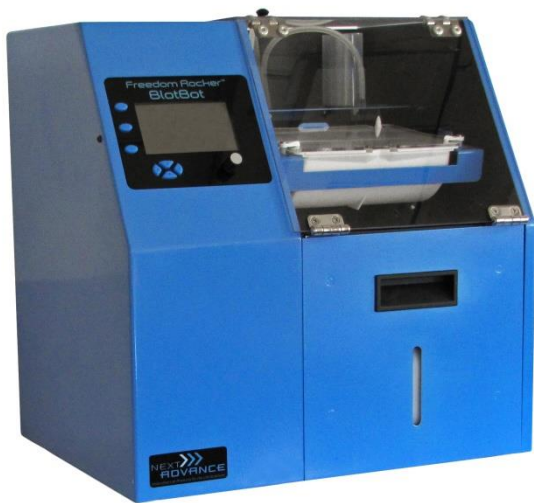


BlotBot 240

手動

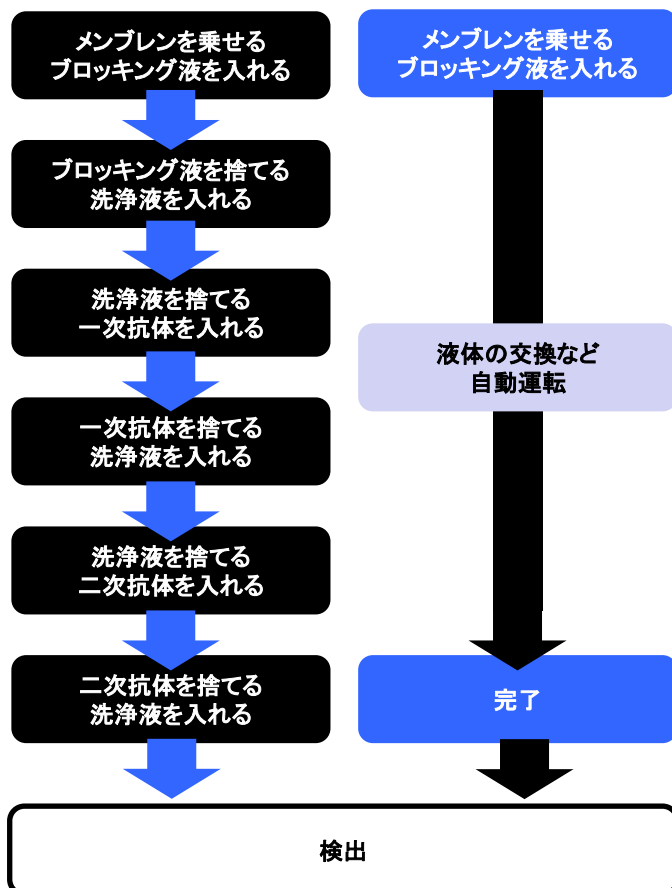

BlotBot使用

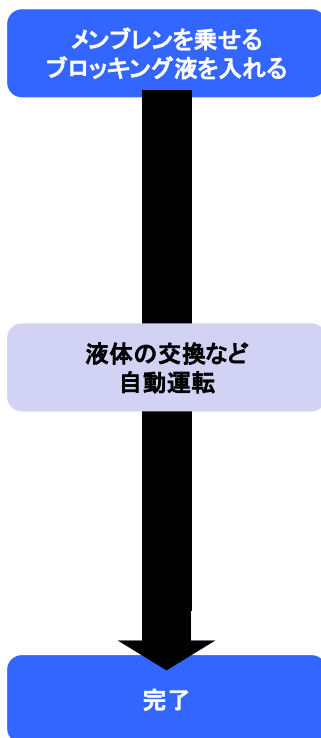

特徴

- ▶ 各種溶液の注入と吸引を自動で行います。
- ▶ 溶液最小使用量: 3.5 mL (mini)
7 mL (midi)
- ▶ 溶液は回収可能です。
- ▶ 標準プロトコルはすでに入ってます。プログラミングは簡単で、最大9ステップまで設定することができます。
- ▶ プロトコルの各ステップは設定可能:
ロッキングスピード (5~40 サイクル/分)
ロッキングタイム (1分~90時間)
溶液量ボリューム (10~150 ml、~10回)
- ▶ プロットまたはゲルを乾燥からを防止するため、最終ステップ終了後、溶液を残しロッキングは続きます。
- ▶ 各トレイは同じプロトコルを行います。
- ▶ トレーは取り外して、洗浄可能です。別途注文することができます。

仕様

Features and Capacities	BlotBot 120	BlotBot 240
Size	45(W) x 36(D) x 46(H) cm	54(W) x 39(D) x 43(H) cm
Weight	17Kg	15Kg
Number of Blots	1 – 2 mini blots or 1 midi blot	1 – 4 mini blots or 1 – 2 midi blots
Buffers	2	2
Buffer Volume	Midi blot tray: 10 – 150 mL	Midi blot tray: 10 – 150 mL
	Mini blot tray: 10 – 75 mL per side	Mini blot tray: 10 – 75 mL per side
Reagents	Dispense: 2	Dispense: 2
	Recover: 1	Recover: 2
Reagent volume	up to 50 mL each	up to 50 mL each
Minimum reagent per blot	Mini blot: 3.5 mL (recover 3 mL)	Mini blot: 3.5 mL (recover 3 mL)
	Midi blot: 7 mL (recover 6 mL)	Midi blot: 7 mL (recover 6 mL)
Protocol steps	1 – 9	1 – 9
Washes per step	1 – 10	1 – 10
Rocks per minute	5 – 40	5 – 40
	independent for each step	independent for each step

※製品名は、各社の登録商標、商標です。

輸入・販売元



〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号
TEL(052)731-8000 (代) / FAX(052)731-5050
website : <http://www.intermedical.co.jp/>
E-mail : info@intermedical.co.jp

